


The Pink Pad[®] EXT

Sistema de posicionamiento prolongado

Instrucciones de uso

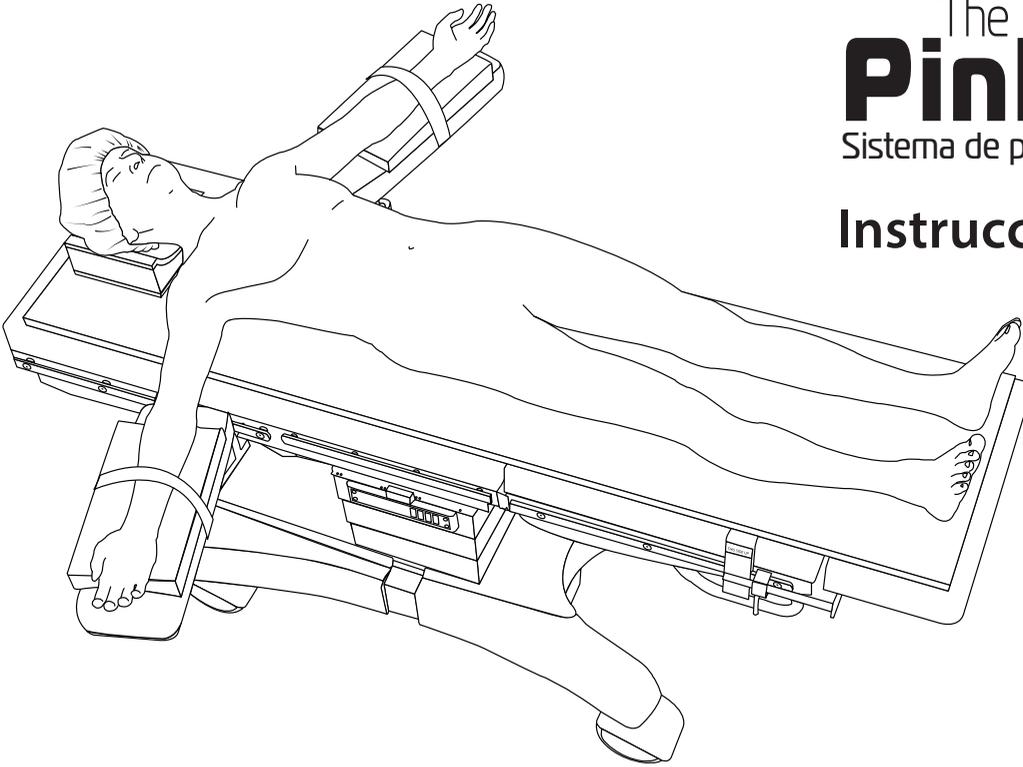

1. Coloque el Pink Pad[®] EXT en la mesa quirúrgica, teniendo cuidado de colocar las correas de Velcro[®] blancas con el escrito "Este lado hacia arriba" (This Side Up) hacia la parte superior. El Pink Pad[®] EXT debe utilizarse con el paciente en posición supino o decúbito lateral. El dispositivo de la calefacción se puede colocar debajo del Pink Pad[®] EXT.
2. Fije las correas de Velcro[®] blancas a las guías de la cama quirúrgica haciendo un lazo alrededor de las guías con la correa inferior y colocando la correa de Velcro[®] superior.
3. Coloque la sábana sobre el Pink Pad[®] EXT de modo que quede centrada entre las correas de Velcro[®] blancas.
4. Siga el protocolo del hospital para la intubación. Luego coloque al paciente correctamente sobre el colchón. **IMPORTANTE: PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA PIEL DEL PACIENTE Y PREVENIR LESIONES, LA PIEL DEL PACIENTE DEBE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON EL PINK PAD[®] EXT.** Utilice la sábana que viene incluida en el kit para levantar con cuidado al paciente y repositonarlo según sea necesario. Asegúrese de que el colchón permanezca siempre completamente plano.
5. Apoye cada almohadilla para brazos con DermaProx[™] en ambos soportes para brazos. Colocar el brazo del paciente de modo que el codo y la muñeca descansen cómodamente sobre la almohadilla.
6. Cierre las correas de las almohadillas para los brazos envolviéndolas alrededor de ambos soportes de ellos mismos y el brazo del paciente.
7. Consulte las instrucciones para usar correctamente los protectores de brazo de un paso. **IMPORTANTE: NO TODOS LOS KITS TIENEN PROTECTORES DE BRAZOS.**

ATENCIÓN:

1. Antes de usar el Pink Pad[®] EXT, asegúrese de que el colchón esté bien fijado a la mesa de operaciones y que esté limpio y libre de residuos.
2. Siga las políticas y pautas del centro para la frecuencia de la monitorización del paciente. Verifique la integridad de la piel y la circulación adecuada. El producto solo debe ser utilizado por un profesional médico autorizado.
3. Preste atención a proteger el Pink Pad[®] EXT de la exposición a químicos corrosivos para la preparación quirúrgica.
4. Manipulación y almacenamiento: Durante TODAS las manipulaciones y el almacenamiento, asegúrese de que el rodamiento esté estirado.



MADE IN THE
USA



EC	REP
----	-----

702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555


xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

One-Step™ Protector para Brazos

Instrucciones de uso

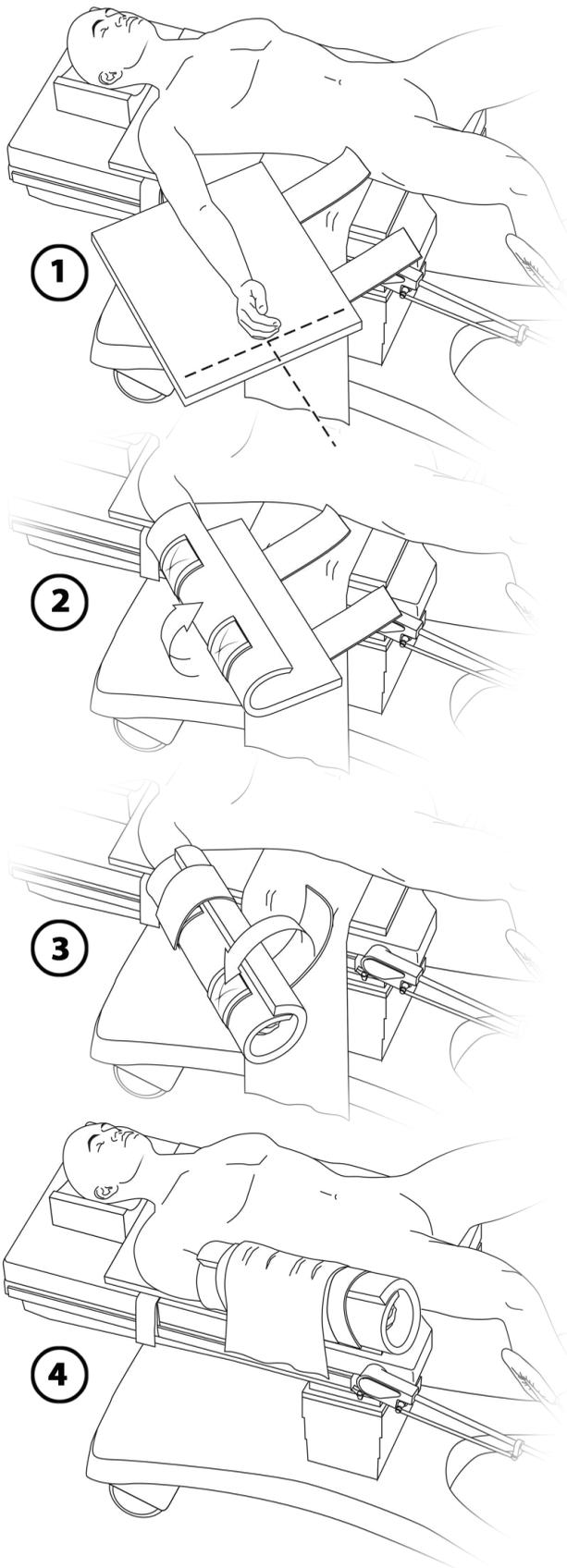

1. Coloque el protector de brazo One-Step™ debajo del brazo del paciente, centrando la protección lateralmente del brazo con las correas hacia abajo y hacia el busto del paciente.

La almohadilla debe extenderse por encima del codo y apenas debajo de las yemas de los dedos. La mano debe ser puesta en posición anatómica natural con las palmas hacia el interior para no interferir con el nervio cubital.

El protector de brazo One-Step™ protegerá: brazo, nervio cubital y dedos permitiendo simultáneamente acceso temporalmente fácil a los dedos y al sitio para inyecciones intravenosas.

2. Envuelva el exterior del protector en el brazo.
3. Envuelva el exterior del siguiente, envuelva el resto el protección del brazo en el brazo y las correas en parches de Velcro® a juego como se muestra. Asegurarse que el protector de brazo One-Step™ esté firmemente envuelto alrededor del brazo del paciente protección en el brazo.

En esta etapa, verifique la alineación adecuada de la muñeca y de los dedos. Además, inspeccione los oxímetros de pulso, venoso, etc. para asegurar un posicionamiento correcto.

El acceso a estos parámetros es simple y repetible. Repita los pasos 1-3 para el otro brazo.

4. Una vez instalados los protectores de brazo One-Step™, enrollar la sábana de elevación según el protocolo del hospital, colocándolo entre el paciente y Pink Pad® EXT.

Los métodos para doblar el paño varían según el protocolo del hospital. La hoja de elevación se puede ocultar debajo del paciente o debajo del colchón de la mesa de operaciones. La tela de elevación no debe colocarse entre el Pink Pad® EXT y el colchón de la mesa de operaciones.