

DermaProxTM

Boot Liner - S+N

Bruksanvisning

Enhetsbeskrivning

Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är designade för att användas med höftpositionssystemet.

Smith & Nephew DermaProx Boot Liners får endast användas en gång och kasseras efter det kirurgiska ingreppet är klart.

Avsedda användare

Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är avsedda att användas av sjukvårdspersonal i enlighet med dessa bruksanvisningar. Användningsmiljön är en professionell sjukvårdsinrättning.

Avsedd användning

Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är designade för att användas med höftpositioneringssystemet för att hjälpa till att dämpa och skydda foten när dragkraft appliceras och minimera fot- och hälglidning under höftledsartroskopi.

Indikationer för användning

Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är indicerade för användning under höftledsartroskopi.

Målpatientgrupper

Patientpopulationen består av patienter för vilka en höftledsartroskopisk procedur bedöms vara nödvändig av operationskirurgen.

Kontraindikationer


- Ingen

Varningar

- Det är vårdgivarens ansvar att vara bekant med produktens IFU samt utbildning av relevant vårdpersonal.
- Produktanvändning utanför indikationer eller avsedd användning är förbjuden. Ändringar av produkten kan ändra förväntade resultat.

Försiktighetsåtgärder

- Inspektera produktförpackningen innan den öppnas. Om produktförpackningen är skadad eller punkterad, **ANVÄND INTE**.
- Inspektera produkten och innehållet när den tas ur förpackningen. Om produkten är skadad eller defekt, **ANVÄND INTE** och kontakta omedelbart tillverkaren för support.

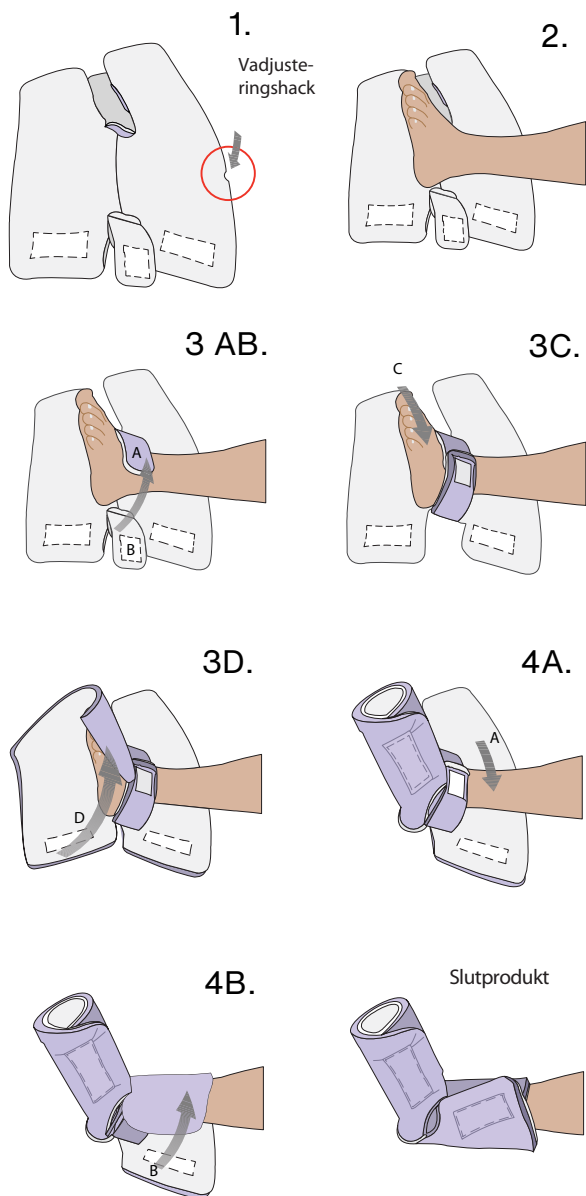

1. Fäll upp stövelsfodret och ha det vita DermaProx™ -skiktet vänt uppåt.

2. Placera patientens hääl i mitten av dynan så att skåran ligger i linje med patientens vad.

3A. Placera rem A (icke-karborrsidan) på mittremmen ovanpå patientens fotled.

3B. Placera rem B (karborrsidan) på mittremmen ovanpå rem A så att patientens fot är lindad. Se till att inte dra åt för hårt.

3C. Vik sidan på dynan utan karborreband runt patientens tår.

3D. Vik ned den nedre halvan av dynan runt resten av patientens tår och placera karborrebandet ovanpå den icke-karborreformade sidan av dynan så att toppen av patientens fot är lindad. Var noga med att inte dra åt för hårt.

4A. Vik sidan på dynan som inte har karborreband runt patientens vad.

4B. Vik ned den nedre halvan av dynan runt resten av patientens vad och placera karborrebandet ovanpå den sidan av dynan som inte har karborreband så att patientens fot är lindad. Var noga med att inte dra åt för hårt.

**Distribueras exklusivt av S+N*

Symbolordlista

	Medicinsk utrustning
	Varning
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Batchkod

	Använd inte om förpackningen är skadad
	Återanvänd inte
	Ingen latex
	Kvantitet
	Katalognummer

	Se elektronisk bruksanvisning
	locke steril
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Europeisk överensstämmelse

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP056 R1 1/20/2022