

Forro para botas

DermaProxTM - S+N

Instrucciones de uso

Descripción del dispositivo

Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew están diseñados para su uso con el sistema de inmovilización de cadera.

Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew son de un solo uso y se debe desechar una vez finalizado el procedimiento quirúrgico.

Uso previsto

Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew debe utilizarlos profesional médico según estas instrucciones de uso. El entorno de uso debe ser un centro sanitario profesional.

Uso previsto

Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew están diseñados para usarse con el sistema de inmovilización de cadera para ayudar a amortiguar y proteger el pie cuando se aplica tracción y minimizar el deslizamiento del pie y el talón durante los procedimientos de artroscopia de cadera.

Instrucciones de uso

Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew están indicados para su uso durante los procedimientos de artroscopia de cadera.

Grupos de pacientes objetivo

Los pacientes objetivo son los que el cirujano determine que necesitan someterse a un procedimiento artroscópico de cadera.

Contraindicaciones


- Ninguna

Advertencias

- El proveedor de atención médica debe familiarizarse con las instrucciones de uso del producto así como formar al personal de atención médica adecuado.
- Se prohíbe el uso del producto si no se siguen las indicaciones o el uso previsto. Las modificaciones del producto pueden cambiar los resultados esperados.

Precauciones

- Inspeccione el embalaje del producto antes de abrirlo. Si el embalaje está dañado o perforado, **NO UTILICE EL PRODUCTO**.
- Inspeccione el producto y el contenido cuando los saque del embalaje. Si el producto está dañado o defectuoso, **NO LO UTILICE** y póngase en contacto inmediatamente con el fabricante para obtener ayuda.

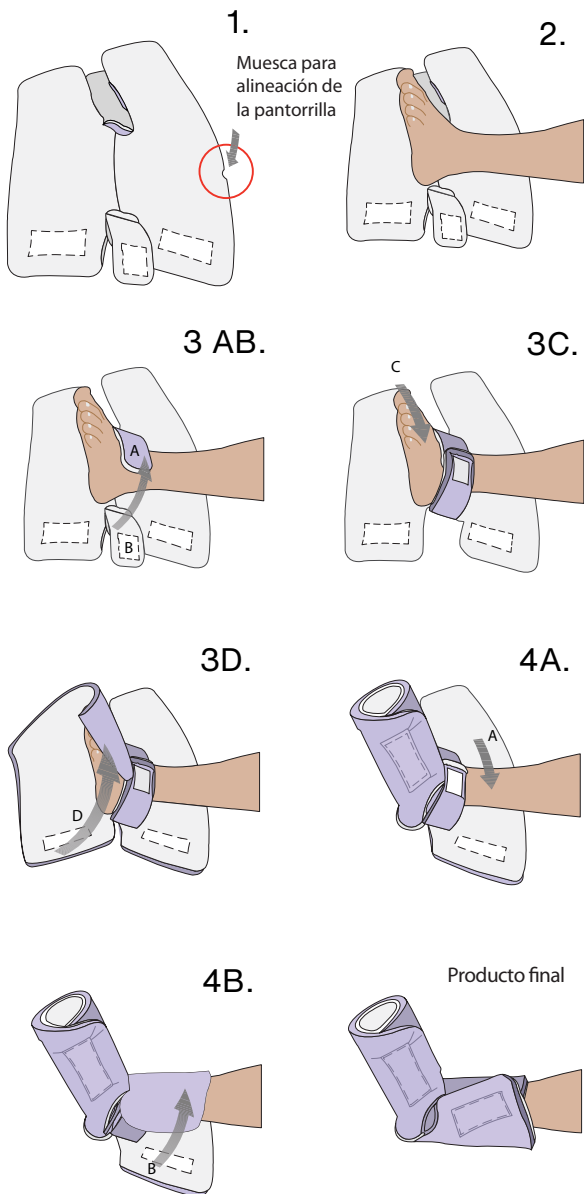

1. Abra el forro para botas con la capa blanca DermaProx™ hacia arriba.

2. Coloque el talón del paciente en la parte central de la almohadilla de modo que la muesca quede alineada con la pantorrilla del paciente.

3A. Coloque la correa A (el lado sin velcro) de la correa central sobre la parte superior del tobillo del paciente.

3B. Coloque la correa B (el lado con velcro) de la correa central sobre la correa A de modo que el pie del paciente quede envuelto. No la apriete demasiado.

3C. Coloque el lado sin velcro de la almohadilla alrededor de los dedos del pie del paciente.

3D. Coloque la mitad inferior de la almohadilla alrededor del resto de los dedos del pie del paciente y ponga el velcro en la parte superior del lado sin velcro de la almohadilla envolviendo la parte superior del pie del paciente. No apriete demasiado.

4A. Coloque el lado sin velcro de la almohadilla alrededor de la pantorrilla del paciente.

4B. Coloque la mitad inferior de la almohadilla alrededor del resto de la pantorrilla del paciente y ponga el velcro en la parte superior del lado sin velcro de la almohadilla envolviendo la pantorrilla del paciente. No apriete demasiado.

**Distribuido exclusivamente por S+N*

Glosario de símbolos

	Dispositivo médico
	Precaución
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Código de lote

	No utilizar si el paquete está dañado
	No reutilizar
	Sin látex
	Cantidad
	Numero de catalogo

	Consultar instrucciones electrónicas para uso
	Sin esterilizar
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Conformidad Europea

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP057 R1 1/20/2022