

Chausson de botte DermaProxTM - S+N

Mode d'emploi

Description de l'appareil

Les chaussons de bottes Smith & Nephew DermaProx sont conçus pour être utilisés avec le système de positionnement de la hanche.

Les chaussons de bottes Smith & Nephew DermaProx sont à usage unique et doivent être éliminés une fois l'intervention chirurgicale terminée.

Utilisateurs concernés

Les chaussons de bottes Smith & Nephew DermaProx sont destinés à être utilisés par des professionnels de la santé conformément à ces instructions d'utilisation. L'environnement d'utilisation est un établissement de santé professionnel.

Usage prévu

Les chaussons de bottes Smith & Nephew DermaProx sont conçus pour être utilisés avec le système de positionnement de la hanche pour amortir les chocs et protéger le pied lorsque la traction est exercée et pour minimiser le glissement du pied et du talon pendant les procédures d'arthroscopie de la hanche.

Mode d'emploi

Les chaussons de bottes Smith & Nephew DermaProx sont indiqués pour une utilisation pendant les procédures d'arthroscopie de la hanche.

Groupes de patients ciblés

Ce dispositif s'adresse aux patients pour lesquels une arthroscopie de la hanche est jugée nécessaire par le chirurgien.

Contre-indications


- Aucune

Mises en garde

- Il incombe au prestataire de soins de se familiariser avec le mode d'emploi des produits et de former le personnel de santé concerné.
- L'utilisation du produit en dehors des indications ou de l'utilisation prévues est interdite. Les modifications du produit peuvent modifier les résultats attendus.

Précautions

- Inspectez l'emballage du produit avant de l'ouvrir. Si l'emballage du produit est endommagé ou perforé, **NE PAS UTILISER**.
- Inspectez le produit et son contenu au moment du déballage. Si le produit est endommagé ou défectueux, **NE L'UTILISEZ PAS** et contactez immédiatement le fabricant pour obtenir de l'aide.

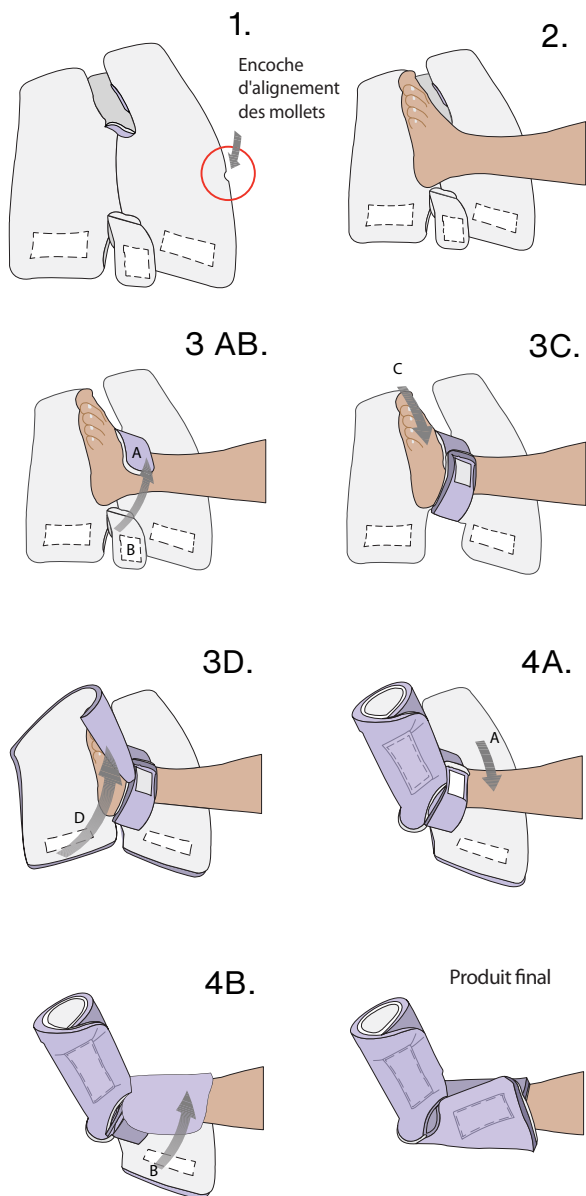

1. Dépliez le chausson et orientez la couche DermaProx™ blanche vers le haut.

2. Placez le talon du patient au milieu du coussin de manière à ce que l'encoche s'aligne avec le mollet du patient.

3A. Placez la sangle A (côté non Velcro) de la sangle centrale sur le dessus de la cheville du patient.

3B. Placez la sangle B (côté Velcro) de la sangle centrale par dessus la sangle A de sorte que le pied du patient soit enveloppé. Assurez-vous de ne pas trop serrer.

3C. Enroulez le côté non Velcro du coussin autour des orteils du patient.

3D. Enroulez la moitié inférieure du coussin autour des autres orteils du patient et placez le Velcro par dessus le côté non Velcro du coussin afin que le dessus du pied du patient soit enveloppé. Veillez à ne pas trop serrer.

4A. Enroulez le côté non Velcro du coussin autour du mollet du patient.

4B. Enroulez la moitié inférieure du coussin autour du mollet du patient et placez le Velcro sur le dessus du côté non Velcro du coussin afin que le pied du patient soit enveloppé. Veillez à ne pas trop serrer.

**Distribué exclusivement par S+N*

Glossaire des symboles

	Dispositif médical
	Mise en garde
	Fabricant
	Date de fabrication
	Code du lot

	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Ne pas réutiliser
	Sans latex
	Quantité
	Numéro de référence

	Consulter les instructions électroniques d'utilisation
	Non stérile
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Conformité européenne

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP058 R1 1/20/2022