

DermaProxTM

부트 라이너 - S+N

사용 지침

장치 설명

Smith & Nephew DermaProx 부트 라이너는 Hip Positioning System과 함께 사용하도록 되어 있습니다.

Smith & Nephew DermaProx 부트 라이너는 일회용이며 수술이 끝나면 폐기합니다.

사용 대상자

Smith & Nephew DermaProx 부트 라이너는 이 사용 지침에 따라 의료 전문가가 사용하도록 되어 있습니다. 사용 환경은 전문 의료 시설입니다.

용도

Smith & Nephew DermaProx 부트 라이너는 견인력이 적용될 때 발을 보호하고 쿠션을 보조하며 고관절 관절경 수술 중에 발과 발꿈치의 미끄러짐을 최소화하기 위해 Hip Positioning System과 함께 사용하도록 되어 있습니다.

사용 지침

Smith and Nephew DermaProx 부트 라이너는 고관절 관절경 수술 중에 사용하기 위한 것입니다.

대상 환자 그룹

환자 모집단은 집도의가 고관절 관절경 수술이 필요하다고 판단한 환자들로 이루어집니다.

금지 사항


- 없음

경고

- 제품 IFU를 숙지하고 관련 의료 인력을 교육하는 것은 의료 제공자의 책임입니다.
- 제품을 표시되거나 의도된 용도 이외로 사용하는 것은 금지됩니다. 제품을 변형하면 예상 결과가 달라질 수 있습니다.

예방 조치

- 개봉 전에 제품 포장을 검사하십시오. 제품 포장이 손상되었거나 구멍이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 포장에서 꺼낼 때 제품과 내용물을 검사하십시오. 제품이 훼손되거나 결함이 있는 경우 사용하지 말고 즉시 제조업체에 지원을 요청하십시오.

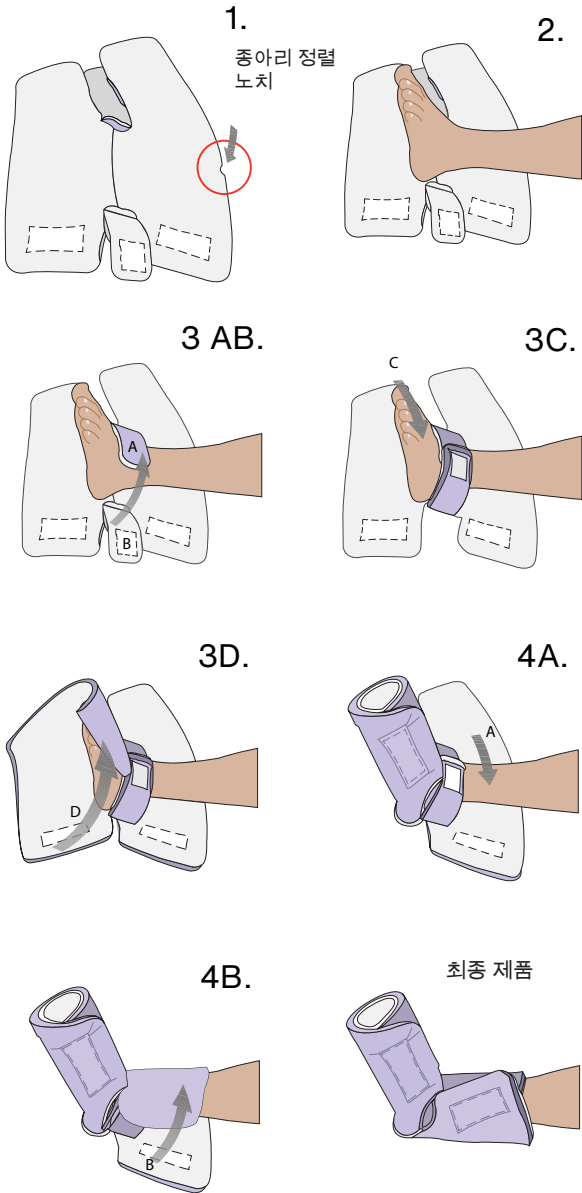

1. 부트 라이너를 펼치고 흰색 DermaProx™ 레이어가 위를 향하도록 합니다.

2. 노치가 환자의 종아리와 나란히 정렬되도록 환자의 뒤꿈치를 패드 중앙에 놓습니다.

3A. 중간 스트랩의 스트랩 A(후크 및 루프가 아닌 쪽)를 환자의 발목 위에 놓습니다.

3B. 환자의 발을 감싸도록 중간 스트랩의 스트랩 B(후크 및 루프 쪽)를 스트랩 A의 위쪽에 놓습니다. 과도하게 조이지 않도록 하십시오.

3C. 패드의 후크 및 루프가 아닌 쪽을 환자의 발가락 주위로 감쌉니다.

3D. 패드의 아래쪽 절반을 환자의 나머지 발가락 주위로 감싸고 패드의 후크 및 루프가 아닌 쪽 상단에 후크 및 루프를 놓아 환자 발의 위쪽을 감쌉니다. 과도하게 조이지 마십시오.

4A. 패드의 벨크로가 아닌 쪽을 환자의 종아리 주위로 감쌉니다.

4B. 패드의 아래쪽 절반을 환자의 나머지 종아리 주위로 감싸고 패드의 벨크로가 아닌 쪽 상단에 벨크로를 놓아 환자 발을 감쌉니다. 과도하게 조이지 마십시오.

*S+N 독점 배포

기호 용어집

	의료 기기
	주의
	제조사
	제조 일자
	배치 코드

	패키지가 손상되어 있으면 사용하지 말 것
	재사용 금지
	라텍스 없음
	수량
	카탈로그 번호

	전자 사용 지침을 참조할 것
	비멸균
	유럽 공동체의 공식 대리인
	유럽 적합성

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP060 R1 1/20/2022