

Støvelinnlegg - S+N

Beskrivelse av enheten

Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg er designet for å brukes med hofteposisjonering systemet.

Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg er beregnet for engangsbruk og må avhendes etter at den kirurgiske prosedyren er fullført.

Tiltenkte brukere

Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg er ment å brukes av helsepersonell i samsvar med denne bruksanvisningen. Bruksmiljøet er profesjonelle helseinstitusjoner.

Bruksområde

Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg er designet for å brukes sammen med hofteposisjonering systemet for å hjelpe til med å polstre og beskytte foten når det påføres trekkraft og minimere fot- og hælglidning under hofteartroskopi.

Indikasjoner for bruk

Smith and Nephew DermaProx støvelinnlegg er indikert for bruk under hofteartroskopi.

Pasientmålgrupper

Pasientpopulasjonen består av pasienter der en artroskopisk hofteprosedyre har blitt fastslått å være nødvendig av kirurg.

Kontraindikasjoner


- Ingen

Advarsler

- Det er helsepersonellens ansvar å gjøre seg kjent med produktets IFU-er samt for opplæringen av relevant helsepersonell.
- Bruk av produktet utenom indikasjoner eller tiltenkt bruk er forbudt. Endringer på produktet kan føre til endringer i det forventede resultatet.

Forholdsregler

- Kontroller produkteballasjen før den åpnes. Hvis produkteballasjen er skadet eller punktert, **IKKE BRUK** produktet.
- Kontroller produktet og innholdet når det tas ut av emballasjen. Hvis produktet er skadet eller defekt, **IKKE BRUK** produktet og ta kontakt umiddelbart med produsenten for brukerstøtte.

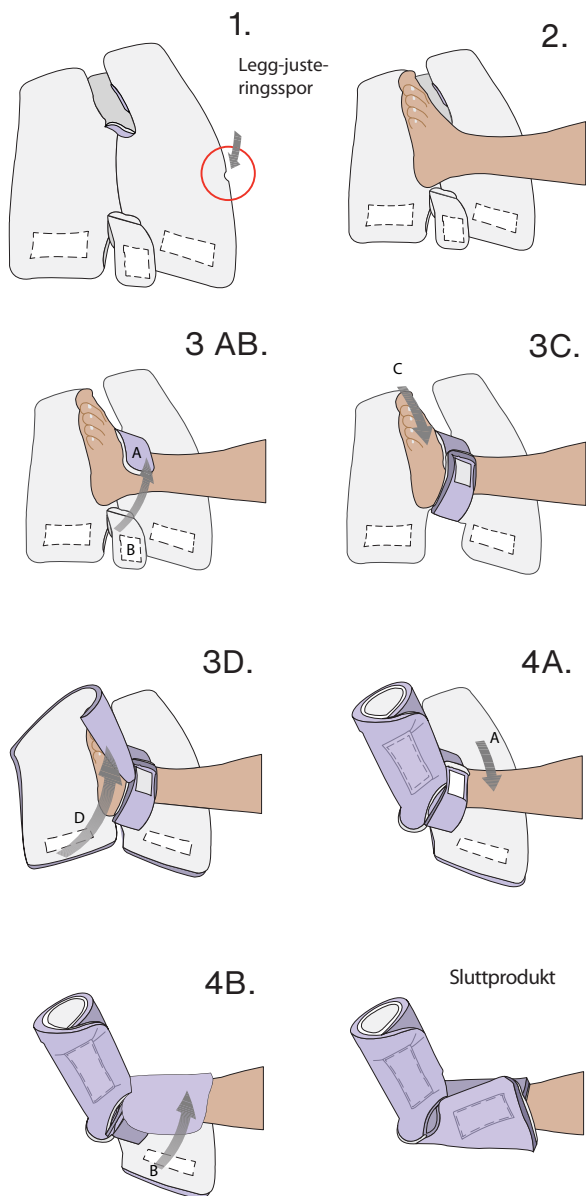

1. Brett ut støvelinnlegget og pass på at det hvite DermaProx™-laget vender oppover.

2. Plasser pasientens hæl i midten av puten slik at sporet er plassert bak på pasientens legg.

3A. Plasser stropp A (siden uten borrelås) på den midterste stroppen, på toppen av pasientens ankel.

3B. Plasser stropp B (borrelåssiden) på den midterste stroppen, ovenpå stropp A, slik at pasientens fot pakkes inn. Pass på å ikke stramme til for mye.

3C. Pakk den siden av puten uten borrelås rundt pasientens tær.

3D. Pakk den nederste halvdel av puten rundt resten av pasientens tær og fest borrelåsen på den siden av puten uten borrelås, slik at foten til pasientens er pakket inn. Ikke stram til for hardt.

4A. Pakk den siden av puten uten borrelås rundt pasientens legg.

4B. Pakk den nederste halvdel av puten rundt resten av pasientens legg og fest borrelåsen på den siden av puten uten borrelås, slik at leggen til pasientens er pakket inn. Ikke stram til for hardt.

**Eksklusivt distribuert av S+N*

Symbolordliste

	Medisinsk enhet
	Forsiktig
	Produsent
	Produksjonsdato
	Batchkode

	Må ikke brukes hvis forpakningen er skadet
	Ikke ment for gjenbruk
	Inneholder ikke lateks
	Mengde
	Katalognummer

	Se bruksanvisning på nettet
	Ikke-steril
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskapet
	Europeisk konformitet

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP063 R1 1/20/2022