

Pink Hip Kit - S + N

사용 지침

Postless Hip Positioning System

장치 설명

Pink Hip Kit S+N은 Smith and Nephew Hip Positioning System과 함께 사용하도록 되어 있습니다.

Pink Hip Kit S+N은 일회용이며 수술이 끝나면 폐기합니다.

Pink Hip Kit S+N(그림 1)의 구성 요소는 다음과 같습니다.

- A. 헤드 레스트 (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. 바디 스트랩 (1)
- D. 리프트 시트 (1)
- E. 암보드 스트랩 (1쌍)
- F. 암보드 패드 (1쌍)

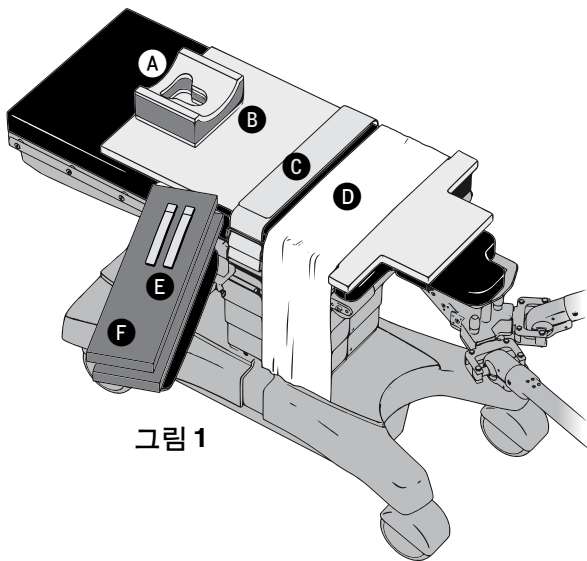


그림 1

사용 대상자

Pink Hip Kit S+N은 이 사용 지침에 따라 의료 전문가가 사용하도록 되어 있습니다. 사용 환경은 전문 의료 시설입니다.

용도

Pink Hip Kit S+N은 Hip Positioning System과 함께 사용하도록 되어 있으며 관절경 고관절 수술 중에 환자가 수술대에서 움직이지 않게 해줍니다.

사용 지침

Pink Hip Kit S+N은 관절경 고관절 수술 중 환자의 위치를 잡는 데 사용하기 위한 것입니다.

대상 환자 그룹

환자 모집단은 집도의가 고관절 관절경 수술이 필요하다고 판단한 환자들로 이루어집니다.

금지 사항

- 없음

경고

- 제품 IFU를 숙지하고 관련 의료 인력을 교육하는 것은 의료 제공자의 책임입니다.
- 제품을 표시되거나 의도된 용도 이외로 사용하는 것은 금지됩니다. 제품을 변형하면 예상 결과가 달라질 수 있습니다.
- Pink Hip Kit S+N을 취급 및 보관하는 동안에는 Pink Hip Pad가 평평해야 합니다. 말거나 접지 마십시오.
- 수술 내내 환자의 피부가 Pink Hip Pad에 직접 닿아야 합니다.

예방 조치


- 개봉 전에 제품 포장을 검사하십시오. 제품 포장이 손상되었거나 구멍이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 포장에서 꺼낼 때 제품과 내용물을 검사하십시오. 제품이 훼손되거나 결함이 있는 경우 사용하지 말고 즉시 제조업체에 지원을 요청하십시오.
- 수술 환자의 위치를 잡을 때 주의하십시오. 환자를 Pink Hip Pad 표면 위에서 끌지 마십시오. 그렇게 하면 제품이 손상되고 기능이 상실될 수 있습니다.

1. 시스템 설정 정보에 대해서는 Smith and Nephew Hip Positioning System 사용 지침을 참조하십시오.

2. 정렬 탭이 Smith and Nephew Supine Table 부착물과 일직선이 되도록 Pink Hip Pad를 수술대에 놓습니다. (그림 2) “This Side Up(이쪽 면이 위로)” 텍스트가 Pink Hip Pad의 흰색 후크 및 루프 스트랩에서 위쪽을 향해야 합니다.

그림 2


Pink Hip Pad의 탭을 수술대 부착물의 탭과 나란히 맞춥니다.

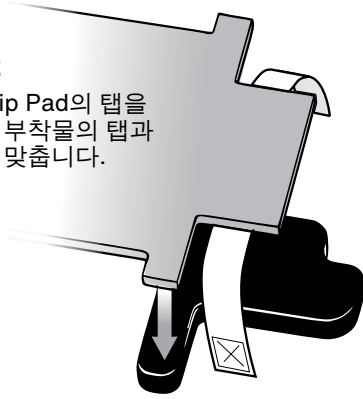

주의: Pink Hip Pad가 수술대 패드의 표면에 직접 닿아야 합니다.

3. 탭의 루프 부분을 수술대와 액세서리 레일 사이에 놓은 후 레일 바깥쪽에서 위로 향하게 하고 후크 및 루프 클로저의 후크 부분을 루프 부분 위에 부착하여 모든 흰색 후크 및 루프 스트랩을 수술대 레일에 부착합니다. (그림 3)

그림 3

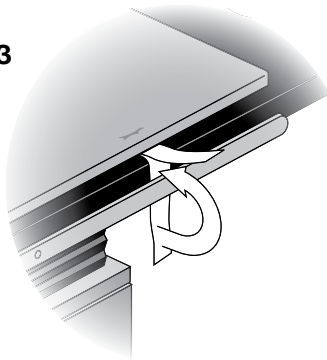

4. 먼저 수술대 부착물 아래에 후크 및 루프가 없는 스트랩 부분을 놓고 여기에 스트랩의 나머지 끝 부분과 겹쳐서 수술대 부착물 아래에 넓은 보라색 패드 스트랩을 부착하면서 꼭 맞도록 후크 및 루프를 고정합니다. (그림 4)


5. 환자 머리를 두기에 충분한 위치에서 환자의 머리를 위치하기에 충분한 자리 중 가장 먼 가장자리 부근에 Pink Hip Pad를 설치하고 헤드 레스트를 그 위에 놓습니다. (그림 1)

6. 정렬 탭 바로 위에 있는 패드 위의 중심에 리프트 시트를 놓습니다. (그림 1)

주의: 리프트 시트는 환자 등의 작은 부분(견갑골과 천골 사이)에서 패드 부분만 덮어야 합니다.

그림 4

수술대 부착물 아래에서 본 모습

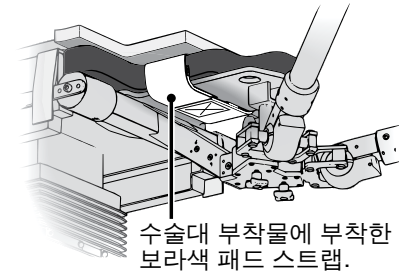


수술대 부착물에 부착한 보라색 패드 스트랩.

7. 두 부분으로 된 바디 스트랩의 양쪽 부분을 액세서리 레일에 고정합니다.

- 스트랩의 각 부분 식별 – 파트 A에는 작은 후크 및 루프 정사각형이 있고 파트 B에는 긴 후크 및 루프 탭이 있습니다. (그림 5)
- 파트 A부터 시작하여 작은 후크 및 루프 정사각형이 수술대 패드와 떨어져 바깥쪽을 향하도록 스트랩 방향을 조정합니다. 수술대와 액세서리 레일 사이에서 벨트 끝 부분을 위로 당기고 스트랩 끝 부분 위에서 플라스틱 버클을 아래로 밀니다. 액세서리 레일에 꼭 맞을 때까지 스트랩을 버클을 통과시켜 넣고 남은 끝 부분을 수술대 위에 놓습니다.
- 긴 후크 및 루프 탭의 후크 쪽이 수술대 패드 내부를 향하도록 하면서 수술대의 다른 쪽에 있는 스트랩의 파트 B에서 이 절차를 반복합니다.
- 파트 A 위에 있는 파트 B의 긴 후크 및 루프 탭으로 스트랩을 모두 묶습니다.

그림 5

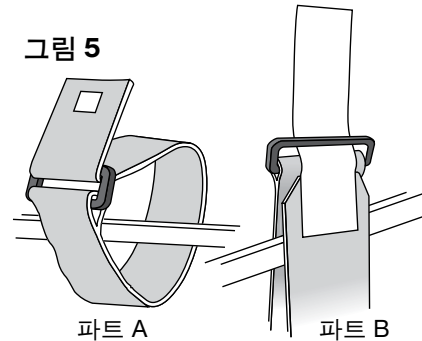


8. 환자를 Pink Hip Pad로 옮깁니다. 환자를 다음과 같이 배치하십시오.

- 환자의 전상장골극(ASIS)을 정렬 탭에 바로 두어야 합니다. (그림 6)
- 약 6인치의 Pink Hip Pad를 환자의 둔근 주름으로 확장합니다.
- 피부 접촉을 최대화하기 위해 어깨가 Pink Hip Pad의 상단 가장자리를 지나서는 안 됩니다.
- 견갑골 부위와 천골의 피부는 Pink Hip Pad의 표면에 닿아야 합니다.
- 필요한 경우 리프트 시트를 사용하여 환자를 패드에서 조심스럽게 들어 올려 위치를 변경합니다. 패드에 있는 환자를 끌지 마십시오. Pink Hip Pad는 항상 평평하게 유지해야 합니다.

9. 수술 고관절 반대편에 있는 수술대의 암보드에 보라색 암보드 패드 하나를 놓습니다.
10. 환자의 손바닥을 위로 향한 채로 보라색 암보드 패드에 환자 팔을 두고 암보드 스트랩으로 고정합니다.
11. 다른 팔을 환자 가슴에 두어 환자 손이 자연스럽게 해부학적으로 올바른 자세가 되도록 합니다.
12. 나머지 보라색 암보드 패드를 환자의 팔과 가슴 사이에 환자의 팔뚝과 평행하게 놓습니다. 보라색 암보드 패드를 환자 손 아래 중앙에 두고 손 위로 뒤로 접어 암보드 패드의 보라색 폼 안에 환자의 손을 끼웁니다.
13. 환자의 팔꿈치, 팔 및 자주색 암보드 패드 위에 보라색 두 부분으로 된 바디 스트랩으로 환자를 둘러 부착하고 후크 및 루프 클로저로 고정합니다.

참고로 완료된 설치 그림을 참조하십시오. (그림 7)

그림 6

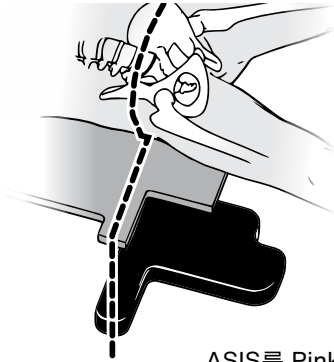

ASIS를 Pink Hip Pad 및 수술대 부착물의 탭과 나란히 맞춥니다.

그림 7

올바르게 배치된 환자의 완료된 설치.



*S+N 독점 배포

기호 용어집

	의료 기기
	주의
	제조사
	제조 일자
	배치 코드

	패키지가 손상되어 있으면 사용하지 말 것
	재사용 금지
	라텍스 없음
	수량
	카탈로그 번호

	전자 사용 지침을 참조할 것
	비멸균
	유럽 공동체의 공식 대리인
	유럽 적합성

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP070 R2 1/20/2022