

# Pink Hip Kit - S + N

Brugsanvisning

Pindeløst hoftepositioneringssystem


## Enhedsbeskrivelse

Pink Hip Kit S+N er designet til at blive brugt sammen med Smith and Nephew Hip Positioning System.

Pink Hip Kit S+N er til engangsbrug og skal bortskaffes efter gennemførelse af den kirurgiske procedure.

Pink Hip Kit S+N (Figur 1) består af følgende komponenter:

- A. Hovedstøtte (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Kropsrem (1)
- D. Løftelagen (1)
- E. Armstøtteremme (1 par)
- F. Armstøttepuder (1 par)

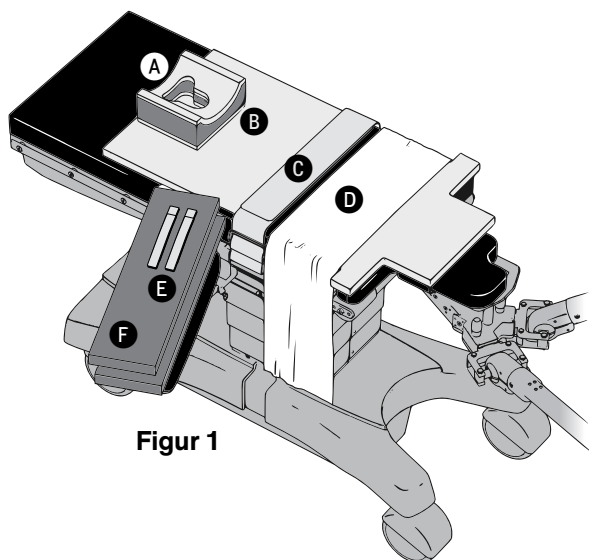

Figur 1

## Tiltænkte brugere

Pink Hip Kit S+N er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Brugs miljøet er et professionelt sundhedsvæsen.

## Anvendelsesformål

Pink Hip Kit S+N er designet til at blive brugt sammen med hoftepositioneringssystemet og forhindrer bevægelse af patienten på operationsbordet under artroskopiske hofteprocedurer.

## Indikationer for brug

Pink Hip Kit S+N er indiceret til brug med henblik på til at placere patienter under artroskopiske hofteprocedurer.

## Tiltænkte patientgrupper

Patientpopulationen består af patienter, for hvem operationskirurgen vurderer, at en hofteartroskopisk procedure er nødvendig.

## Kontraindikationer

- Ingen

## Advarsler

- Det er sundhedsudbyderens ansvar at være bekendt med brugsanvisningen for produktet samt uddannelse af relevant sundhedspersonale.
- Produktbrug uden for indikationer eller tilsigtet brug er forbudt. Ændringer af produktet kan ændre de forventede resultater.
- Under al håndtering og opbevaring af Pink Hip Kit S+N skal du sikre dig, at Pink Hip Pad er flad. Må ikke rulles eller foldes.
- Sørg for, at patientens hud er i direkte kontakt med Pink Hip Pad under hele proceduren.


## Forholdsregler

- Undersøg produktemballagen før åbning. Hvis produktemballagen er beskadiget eller punkteret, må produktet IKKE bruges.
- Efterse produktet og indholdet ved fjernelse fra emballagen. Hvis produktet er beskadiget eller defekt, må det IKKE bruges. Kontakt straks producenten for at få support.
- Vær forsigtig, når du placerer kirurgiske patienter. Træk ikke patienter hen over overfladen af Pink Hip Pad, da dette kan resultere i produktskade og funktionstab.

1. Se brugsvejledningen til Smith and Nephews hoftepositioneringssystem for oplysninger om systemets installation.
2. Placer Pink Hip Pad på operationsbordet, så justeringsstropperne er på linje med Smith og Nephew-bordfastgørelsen til rygliggende position. (Figur 2) Teksten "Denne side op" skal vende opad på de hvide burrebånd, der er placeret på Pink Hip Pad.

**Figur 2**


Placer Pink Hip Pads stropper på linje med bordfastgørelsens stropper.

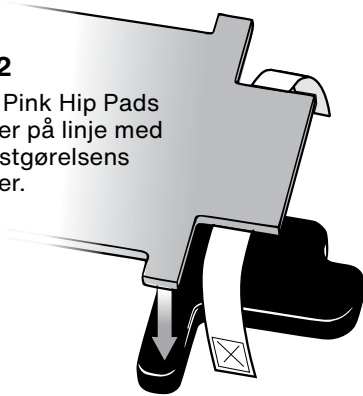

**ADVARSEL:** Sørg for, at Pink Hip Pad er i direkte kontakt med overfladen af operationsbordets pude.

3. Fastgør alle hvide burrebånd til operationsbordets skinner ved at trække stropkens bløde burredel ned mellem bordet og tilbehørsskinnen og derefter op over skinnens yderside og fastgøre burrelukningens krogdel på den bløde del. (Figur 3)


**Figur 3**

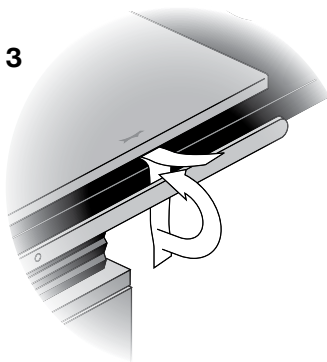

4. Fastgør pudens brede lilla strop under det kirurgiske bords fastgørelse ved først at placere den del af remmen uden burrebånd under bordfastgørelsen og lægge den resterende ende af remmen ovenpå denne for at fastgøre burrebåndet. Sørg for, at burrebåndet sidder ordentligt sammen. (Figur 4)
5. Placer hovedstøtten på Pink Hip Pad tæt på den kant, der er længst væk fra hoftefastgørelsen på et sted, der passer til patientens hoved. (Figur 1)
6. Centrér løftelagnet over puden lige over justeringsstropperne. (Figur 1)

**ADVARSEL:** Løftelagnet skal kun dække den del af puden, hvor patientens lænd støtter (mellem scapulae og sakrum).

**Figur 4** Set fra under bordfastgørelsen

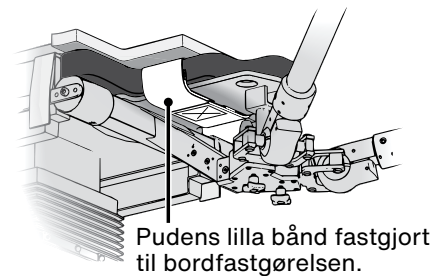


Pudens lilla bånd fastgjort til bordfastgørelsen.

7. Fastgør begge dele af den todelte kropsrem til tilbehørsskinnerne:

- Identificer begge remmens dele - del A har en lille burrebåndsfirkant og del B har en lang burrebåndstrop. (Figur 5)
- Begynd med del A og vend stroppen, så den lille burrebåndsfirkant vender udad væk fra bordets pude. Træk remmens ende op mellem bordet og tilbehørsskinnen, og skub plastikspændet ned over remmens ende. Før stroppen gennem spændet, indtil den sidder tæt ind til tilbehørsskinnen, og læg den frie ende over bordet.
- Gentag proceduren med remmens del B på den anden side af bordet, og sørg for, at burrebåndsstroppens krogside vender indad mod bordpuden.
- Sæt stropperne sammen ved at lægge den lange burrebåndsdelen på del B oven på del A.

**Figur 5**

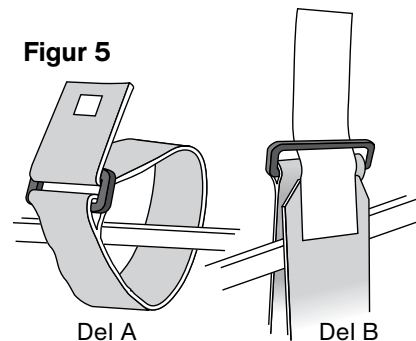

8. Overfør patienten til Pink Hip Pad. Placer patienten som følger:


- Patientens anterior superior iliac-rygsøjle (ASIS) skal placeres direkte på justeringsstropperne. (Figur 6)
- Cirka 6 tommer (15 cm) af Pink Hip Pad rager ud fra patientens sædefold.
- Sørg for, at skuldrene ikke strækker sig ud over Pink Hip Pads øverste kant for at maksimere hudkontakt.
- Huden i det scapulære område og korsbenet skal være i kontakt med Pink Hip Pads overflade.
- Brug om nødvendigt løftelagnet til forsigtigt at LØFTE patienten op fra puden for at flytte på denne. Undgå at trække patienten på puden. Sørg for, at Pink Hip Pad altid er flad.

9. Placer en lilla armstøttepude på operationsbordets armstøtte på den modsatte side af den hofte, der skal opereres.
10. Placer patientens arm på den lilla armstøttepude med håndfladen opad, og fastgør den med en armstøtterem.
11. Læg den anden arm hen over patientens bryst, og sørg for, at hånden er i en naturlig, anatomisk korrekt position.
12. Placer den sidste lilla armstøttepude mellem patientens arm og bryst parallelt med patientens underarm. Center den lilla armstøttepude under patientens hånd, og fold den tilbage over hånden, så patientens hånd er omsluttet af armstøttepudens lilla skum.
13. Fastgør den lilla todelte kropsrem rundt om patienten over patientens albue, arm og den lilla armstøttepude, og sæt den fast med burrebåndslukningen.


Se illustrationen over fuldført installation for reference.  
(Figur 7)

**Figur 7**

Fuldført installation med korrekt placeret patient.

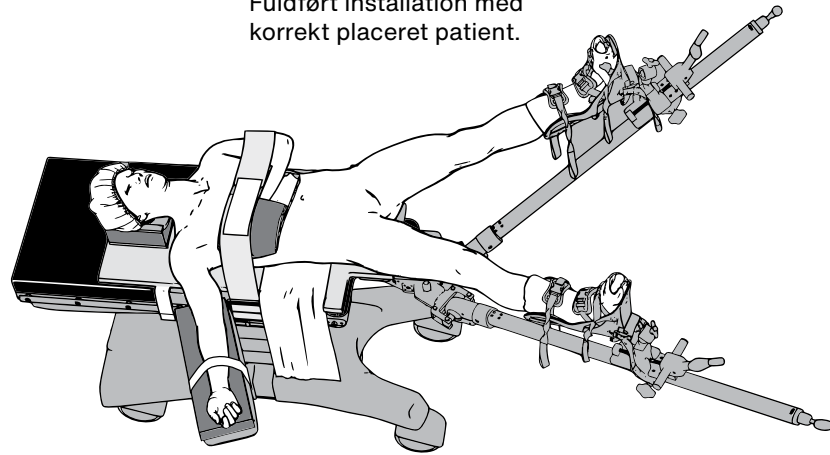

**Figur 6**

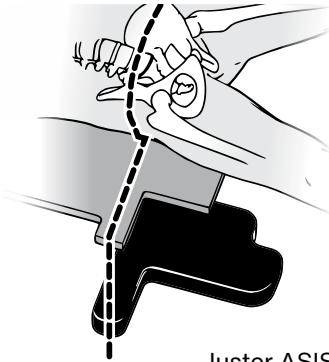

Juster ASIS efter  
Pink Hip Pads og  
bordfastgørelsens  
stropper.

\*Eksklusivt distribueret af S+N

## Ordliste over symboler

	Medicinsk udstyr
	Advarsel
	Producent
	Fremstillingsdato
	Batch-kode

	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
	Må ikke genbruges
	Uden latex
	Antal
	Katalognummer

	Se den elektroniske brugsanvisning
	Ikke-steril
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Europæisk overensstemmelse

**XODUS MEDICAL**  
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500  
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP076 R0 1/21/2022