

ISTRUZIONI PER L'USO: CUNEI DI POSIZIONAMENTO PER IL CORPO

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.

DESCRIZIONE

I cunei di posizionamento per il corpo sono dispositivi monouso progettati per l'utilizzo durante procedure chirurgiche. Forniscono supporto, stabilità ed elevazione controllata del corpo del paziente per ottenere un corretto posizionamento chirurgico e contribuire a ridurre il rischio di lesioni correlate alla pressione.

Questi cunei sono disponibili in diverse configurazioni e dimensioni (inclusi modelli a basso profilo, laterali e multi-angolo) per soddisfare una varietà di esigenze chirurgiche e anatomiche.

INDICAZIONI

I cunei di posizionamento per il corpo sono dispositivi monouso, non sterili, destinati all'uso durante interventi chirurgici per facilitare il corretto posizionamento del paziente. Forniscono supporto e stabilità nelle posizioni laterale, supina e prona, contribuendo a ridurre il rischio di lesioni del paziente correlate a pressione prolungata o a posizionamento improprio.

FINALITÀ E UTENTE

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di operatori sanitari qualificati.

CONTROINDICAZIONI

Questo dispositivo non è progettato, venduto o destinato ad un uso diverso da quanto qui indicato.

CONOSCENZA E UTILIZZO


L'uso professionale richiede la conoscenza di queste istruzioni per l'uso. L'uso del dispositivo si limita alla sala operatoria chirurgica di un ospedale o di un centro chirurgico.

BENEFICI CLINICI

- Garantisce un posizionamento stabile del paziente in diverse posizioni e angolazioni chirurgiche.
- Facilita un accesso ottimale per l'équipe chirurgica.
- Contribuisce a ridurre il rischio di lesioni correlate al posizionamento o alla pressione.

PREPARAZIONE E UTILIZZO

- I cunei di posizionamento per il corpo possono essere utilizzati per diverse esigenze di posizionamento in base alla necessità chirurgica e all'anatomia del paziente.
- Posizionare il cuneo sotto o accanto al paziente per ottenere l'orientamento desiderato (laterale, supino, prono o supporto angolato)
- Assicurarsi che il cuneo sia posizionato in modo sicuro e confortevole per ottimizzare la stabilità ed evitare scivolamenti o disagi per il paziente.
- Monitorare continuamente l'integrità cutanea e la circolazione del paziente per tutta la durata della procedura.
- Seguire le politiche e i protocolli della propria struttura per la frequenza del monitoraggio dei pazienti.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da operatori sanitari autorizzati.

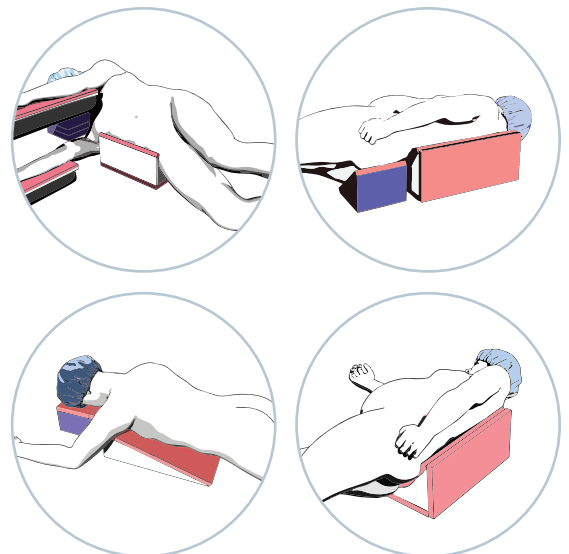

- Proteggere il dispositivo dall'esposizione a soluzioni per la preparazione chirurgica.

SMALTIMENTO

- Dopo l'uso, i cunei di posizionamento per il corpo devono essere smaltiti in conformità con la politica ospedaliera.

AVVERTENZE

- Esclusivamente monouso. Il riutilizzo o il ricondizionamento possono provocare malfunzionamenti del dispositivo, contaminazioni o lesioni al paziente.
- Il ricondizionamento di questo dispositivo può creare un rischio di contaminazione e infezione del paziente.
- Non riutilizzare o ricondizionare questo dispositivo.
- Dopo l'uso, i cunei di posizionamento per il corpo devono essere smaltiti in conformità con la politica ospedaliera.
- Verificare l'integrità della cute e la corretta circolazione sanguigna.
- Conservare i cunei in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.

PRECAUZIONI

- I cunei di posizionamento per il corpo sono destinati esclusivamente all'uso in ambito perioperatorio.
- Utilizzare il dispositivo in conformità alle istruzioni per l'uso e tenendo conto di eventuali controindicazioni, avvertenze o precauzioni fornite dal produttore delle apparecchiature di posizionamento o degli strumenti chirurgici associati.
- Seguire le politiche e le linee guida della propria struttura per la frequenza del monitoraggio del paziente.
- Comunicare all'utente e/o al paziente che qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato all'autorità competente del Paese in cui si trova l'utente e/o il paziente, nonché a Xodus Medical e al suo rappresentante autorizzato.

SPECIFICHE TECNICHE

- I materiali di fabbricazione includono:
 - » Schiuma poliuretanic
- Periodo di validità - Indefinito

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E FUNZIONAMENTO

- Conservare i cunei di posizionamento per il corpo in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente prima dell'uso. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.



Dispositivo
medico



Non sterile



xodusmedical.com/eifu

Consultare le istruzioni
per l'uso in formato
elettronico



Non
riutilizzare



Non realizzato con
lattice di gomma
naturale



Non utilizzare se
la confezione è
danneggiata o
aperta



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive
New Kensington, PA 15068,
United States

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com
Tel: 1+724-337-5500

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED



PRODOTTO NEGLI
**STATI
UNITI**

LITIFUWD003 R0 3/6/2026