

GEBRAUCHSANWEISUNG: Das Pink Hip Kit™ - Hana™


1. Platzieren Sie das Pink Hip Pad so am Dammbereich des Tisches, dass das Pink Hip Pad direkten Kontakt mit der Tischoberfläche hat. Positionieren Sie die weißen Klettbinden so auf der Unterseite des Pink Hip Pad, dass die Markierung "This Side Up" nach oben zeigt.
2. Bringen Sie die weißen Klettbinden an den Schienen des OP-Bettes an, indem Sie sie unter die Schiene legen und die Enden des Klettbandes zusammenfügen.
3. Befestigen Sie den violetten Gurt unter dem Operationstisch, indem Sie zuerst das längere Ende des violetten Gurtes unter den Tisch legen und dann das längere Ende des Gurtes mit dem kürzeren Ende des Gurtes überlappen. Achten Sie darauf, das weiße Hakenmaterial des kürzeren Riemenendes fest auf das längere Riemenende zu drücken, um es zu sichern.
4. Legen Sie das Hebeband wie gezeigt mittig zwischen den Klettbinden auf das Polster. Das Hebeband sollte nur den Teil des Polsters bedecken, der sich zwischen der Schulterblattregion und dem Kreuzbein befindet.
5. Platzieren Sie den Kopfpositionierer über dem Pink Hip Pad an einer Stelle, die für die Platzierung des Patientenkopfs ausreicht.
6. Legen Sie ein Arm-Polster unter den Arm des Patienten, der sich auf der gegenüberliegenden Seite der operativen Hüfte befindet. Legen Sie den Arm mit den Handflächen nach oben oder gemäß dem Lagerungsprotokoll Krankenhauses auf die Armstütze.
7. Setzen Sie die Füße des Patienten in die Traktions-Innenschuhe * ein.
8. Legen Sie den anderen Arm mit dem anderen Arm-Polster über die Brust des Patienten, so dass es den Arm des Patienten auf seiner Brust abfedert.
 - A. Befestigen Sie die Körpergurte wie folgt: a. Gurt um die Unterseite des Tisches legen
 - B. Bringen Sie zwei Enden zur Oberseite des Tisches und platzieren Sie den Haken mit dem Klettverschluss oben auf dem Netz mit dem Klettverschluss
9. Platzieren Sie die umwickelten Füße des Patienten in jedem Traktionsschuh und sichern Sie die Gurte.
10. **WICHTIG** - Positionieren Sie den Patienten so, dass die Schultern nicht über die Oberkante des Polsters hinausragen.

WICHTIG - Die Haut der Schulterblattregion und des Kreuzbeins muss die Oberfläche des Polsters berühren. Verwenden Sie das mitgelieferte Hebeband, um den Patienten vorsichtig vom Polster abzuheben und neu zu positionieren, damit die Steigbügel sicher und ordnungsgemäß angelegt werden können. Stellen Sie sicher, dass das Polster immer vollständig flach bleibt.



WICHTIG:

1. Vergewissern Sie sich vor Verwendung des Pink Hip Pad, dass die OP-Tischauflage sicher am OP-Tisch befestigt ist.
2. Befolgen Sie unbedingt die Regeln und Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Häufigkeit der Patientenüberwachung. Überprüfen Sie die Haut auf Unversehrtheit und Durchblutung. Das Produkt darf nur von einem zugelassenen Arzt verwendet werden.
3. Handhabung und Lagerung: Stellen Sie während der gesamten Handhabung und Lagerung sicher, dass das Polster flach ist. Das Polster nicht rollen oder falten.

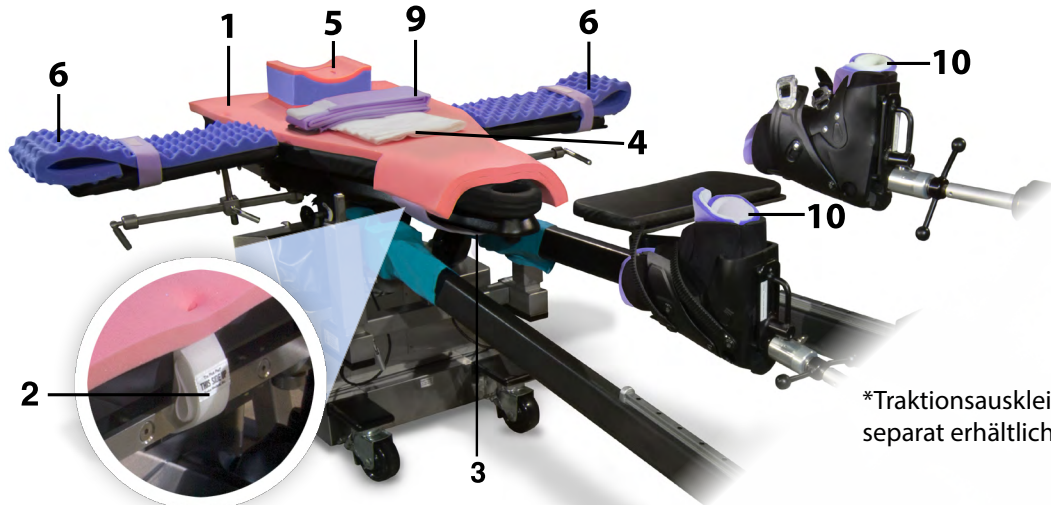


*Traktionsauskleidungen sind separat erhältlich

LITIFUPP014 R1 5/19/2021

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

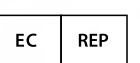

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

