
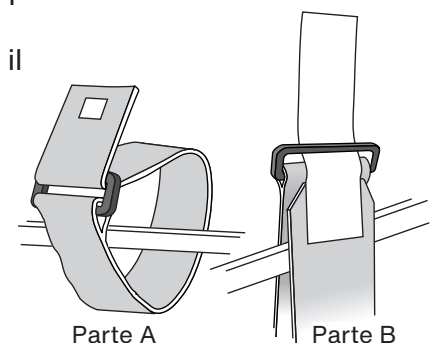


1. Posizionare il Pad Pink Hip™ nella sezione distale del tavolo in modo che il pad sia diretto a contatto con la superficie del tavolo. Posizionare le cinghie bianche Velcro nella parte inferiore di The Pink Hip Pad in modo che l'etichetta "This Side Up" sia rivolta verso l'alto.
2. Fissare entrambe le cinghie di Velcro bianche alle guide del letto chirurgico facendo un loop sotto la rotaia e apponendo le estremità del Velcro insieme come si vede nella Figura 1.
3. Posizionare il capo posizionario sopra The Pink Hip Pad in una posizione adeguata per il posizionamento della testa del paziente.
4. Posare il foglio di sollevamento sopra il pad, centrato tra le cinghie bianche. Il foglio di sollevamento dovrebbe coprire solo la porzione del pad che coinvolge la schiena del paziente - sotto la regione Scapula e sopra il Sacrum. Iniziare IV o intubazione secondo il protocollo ospedaliero.
5. Iniziare a posizionare il paziente su The Pink Hip Pad con il foglio di sollevamento fornito. Utilizzare il foglio di sollevamento per sollevare con attenzione il paziente dal pad per riposizionare in base alle esigenze per un'applicazione sicura e corretta. Non trascinare il paziente sul pad e assicurarsi che il pad rimanga sempre piatto.
6. Mettere i piedi del paziente in rivestimenti di uso (se appropriato) quindi avvolgere i piedi del paziente secondo il protocollo ospedaliero.
7. Posizionare la gamba non operativa sulla staffa della gamba attaccata con il ginocchio con un angolo di 90 gradi.
8. Posizionare il braccio del paziente sull'apposito reggi braccio al lato opposto dell'anca operativa. Posizionare il braccio sulla stesso con i palmi delle mani in alto o per protocollo di posizionamento ospedaliero
9. Posizionare l'altro braccio sul petto del paziente con l'altro cuscinetto del kit o sul supporto dell'arto collegato in modo che il pad relativo ammortizza il braccio del paziente. Avvolgere il braccio secondo il protocollo ospedaliero
 - 9A. Posizionare la cinghia viola del corpo sul braccio del paziente e attaccare le cinghie del corpo come segue.
 - 9B. Ripetere il passaggio precedente sull'altro lato del tavolo con il componente della cinghia rimanente con il lato del gancio del Velcro rivolto verso il basso. Unire le cinghie insieme in modo che passi sopra il braccio e il torace del paziente
10. Mettere il piede del paziente del lato intervento avvolto in staffa, quindi il processo di vincolo con gli strips alla staffa e iniziare il processo di distrazione dell'anca di interesse senza uso del post.

Figura 1

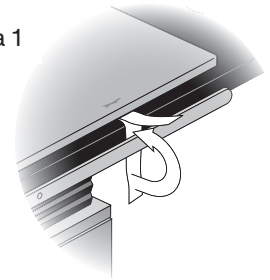


IMPORATNTE:

- Posizionare la piega glutea del paziente in allineamento con l'estremità distale del pad.
- Se il paziente presenta una problematica anatomica durante la tentata distrazione, l'uso dell'aria per artrografia potrebbe facilitare il processo di distrazione.

ATTENZIONE:

- A. Prima di utilizzare The Pink Hip Kit, assicurarsi che il tappetino da tavolo O.R. sia saldamente apposto al tavolo O.R.
- B. Assicurati di seguire le indicazioni e le linee guida della tua struttura per la frequenza del monitoraggio dei pazienti. Verificare l'integrità della pelle e la corretta circolazione. Il prodotto deve essere utilizzato solo da un professionista medico autorizzato.

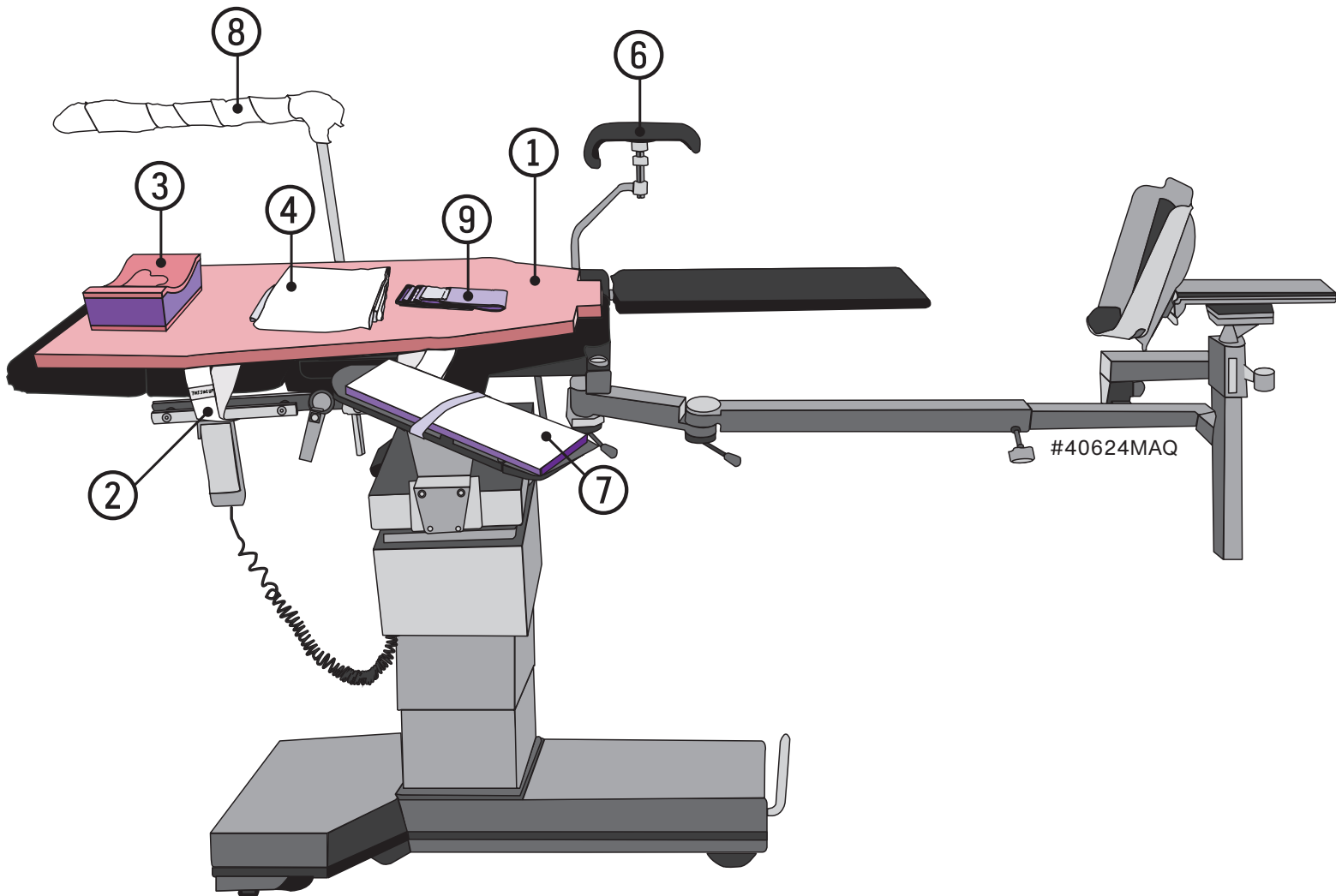


702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555



xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

MADE IN THE
USA

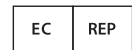

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands