


Instrucciones de uso

Protector para botas inmovilizadoras


40531H

Consulte los protocolos de inmovilización de pacientes de su centro antes de su uso


1. Establezca la orientación adecuada del protector para botas. El borde cosido debe alinearse con la planta del pie del paciente.
2. Abra las correas de velcro y deslice el protector abierto sobre el pie del paciente con la orientación adecuada.
3. Envuelva el pie firmemente con los lados del protector y cierre la correa de velcro. Debe quedar bien ajustado sin impedir la circulación.
4. Envuelva la parte inferior de la pantorrilla y cierre la otra correa de velcro. De nuevo, no apriete demasiado.
5. Una vez que el protector esté firmemente colocado, introduzca el pie en la bota inmovilizadora. Repita los pasos del 1 al 4 con el otro pie.

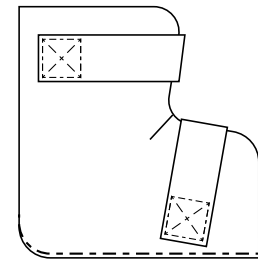

- 1 El borde cosido debe quedar alineado con el pie.

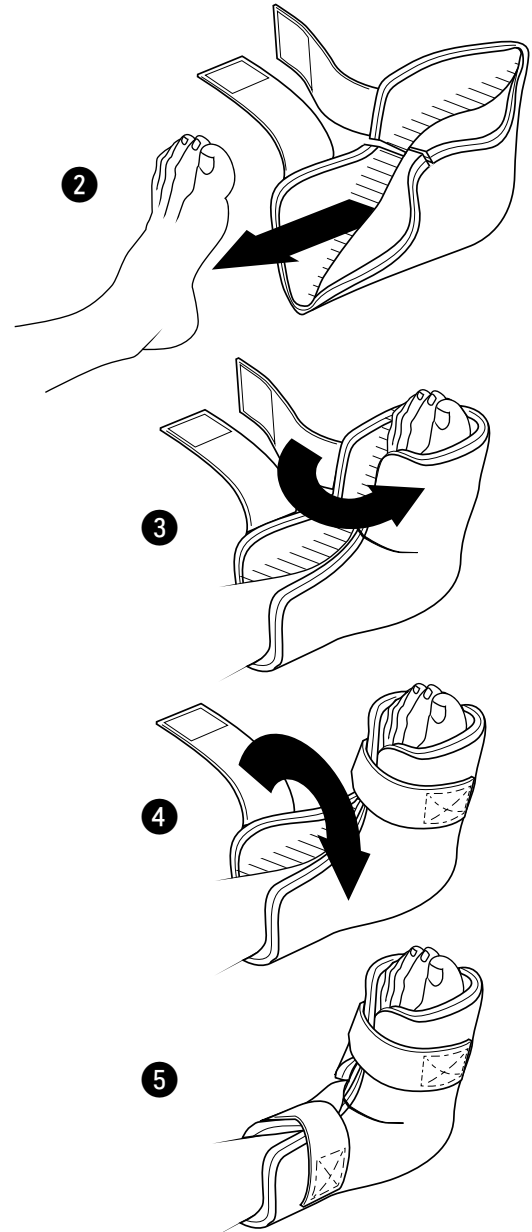

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

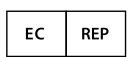

702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED


xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

LITIFUPP047 R0 6/17/2021