


Instruções de utilização

# Boot Liners de tração


40531H

Consulte os protocolos de posicionamento do paciente da sua instituição antes de usar


1. Estabeleça a orientação adequada do boot liner. A borda costurada ficará alinhada com a sola do pé do paciente.
2. Abra as tiras de velcro e deslize o boot liner aberto sobre o pé do paciente na orientação adequada.
3. Enrole as laterais do boot liner em volta do ajuste e prenda o velcro. O ajuste deve ser confortável sem impedir a circulação.
4. Enrole a parte inferior da barriga da perna e prenda o velcro restante. Novamente, certifique-se de que não aperta de mais.
5. O boot liner está agora está preso e o pé está pronto para ser colocado na bota de tração. Repita as etapas 1 a 4 para o outro pé.

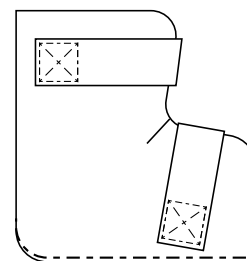


- 1 A borda costurada alinha-se com a sola do pé.

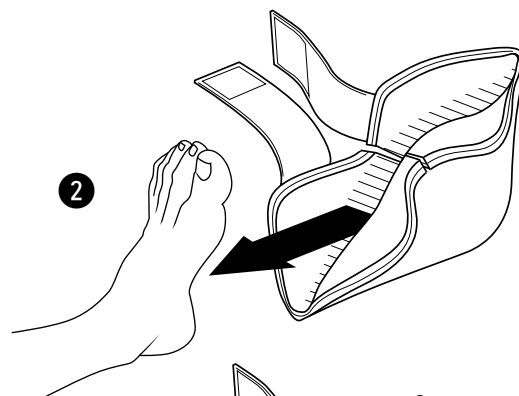


2

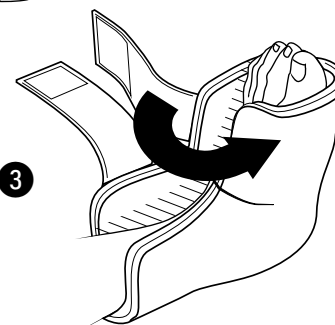

3

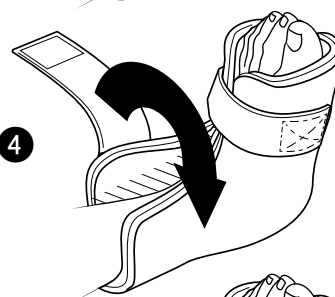

4

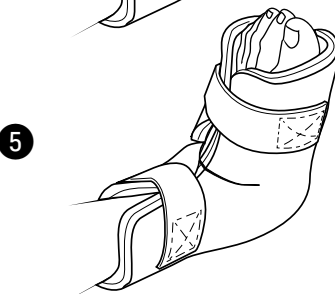

5

**XODUS MEDICAL**  
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive  
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500  
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED

  
xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

LITIFUPP052 R0 6/17/2021